



ТАЛИЦА

УСТРОЙСТВО (БЮВЕТ)
ДОЗИРОВАННОГО ОТПУСКА
ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ,
В ТОМ ЧИСЛЕ МИНЕРАЛЬНОЙ



ФИЗИОТЕРАПЕВТИЧЕСКИЕ
ТЕХНОЛОГИИ И ОБОРУДОВАНИЕ

СОВРЕМЕННЫЙ
ИНЖЕНЕРНЫЙ ПОДХОД

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ «ТММ»

Российский разработчик и производитель медицинского оборудования для проведения физиотерапевтических процедур в санаториях, профилакториях, центрах восстановительной медицины и клиниках.

За многолетний период работы фирмой «ТММ» накоплен большой опыт в области проектирования и изготовления оборудования на современном инженерном уровне, критерием которого являются актуальность медицинской проблемы, эффективность и безопасность создаваемого оборудования.

В разработанных и поставленных на серийное

производство образцах медицинской техники объединены уникальные исследования российских НИИ курортологии и физиотерапии, конструкторский и производственный потенциал компании «ТММ», а также успешная апробация медицинских технологий в санаториях города-курорта Белокуриха.

За создание и успешное внедрение новейших разработок в области медицинской техники компания «ТММ» награждена многочисленными дипломами и медалями.

Компания «ТММ» предлагает полный комплекс услуг по установке оборудования, его обслуживанию и предоставляет гарантию на все выполненные работы.

МИССИЯ КОМПАНИИ:

ИЗГОТОВЛЕНИЕ НАДЁЖНОГО
ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННОГО
ОБОРУДОВАНИЯ
И ЕГО ПОСТОЯННОЕ
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ
В СВЕТЕ РЕАЛИЗАЦИИ
СОВРЕМЕННЫХ
МЕДИЦИНСКИХ
ТЕХНОЛОГИЙ





УВАЖАЕМЫЕ ПАРТНЁРЫ!

Благодарю Вас за внимание, уделённое нашей компании и продукции, которую мы спроектировали и разработали специально для воплощения в жизнь Ваших самых смелых замыслов в области тракционной терапии, водо- и пантолечения.

С наилучшими пожеланиями
здоровья Вам,
Вашему коллективу
и Вашим пациентам.

Н. Н. Галаев,
директор ООО «ТММ»

В ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ПРАВИЛЬНОСТИ ВАШЕГО РЕШЕНИЯ МОГУ СКАЗАТЬ СЛЕДУЮЩЕЕ:

- наше предприятие занимается выпуском физиотерапевтического оборудования с 1997 года;
- всё выпускаемое оборудование – это результат труда всего коллектива, обладающего необходимыми компетенциями, начиная от инженеров-разработчиков и заканчивая производственным персоналом;
- конструктивные решения, заложенные в изделиях, защищены патентами Российской Федерации на изобретения;
- изделия выпускаются на собственной производственной базе с использованием современного оборудования;
- для выпуска медицинских изделий используются проверенные временем комплектующие мировых производителей.

ТАКИМ ОБРАЗОМ, ОСТАНОВИВ СВОЙ ВЫБОР НА НАШЕЙ КОМПАНИИ, ВЫ ПОЛУЧИТЕ:



**ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ
ОБОРУДОВАНИЕ**
с продолжительным
сроком службы



**КАЧЕСТВЕННЫЙ
МОНТАЖ И ОБУЧЕНИЕ**
Вашего персонала
от «первых лиц»



ТЕХНИЧЕСКУЮ ПОДДЕРЖКУ
и, в случае необходимости,
ремонт в период всего срока службы
в каком бы уголке России
или ближнего зарубежья Вы не находились

МИНЕРАЛЬНАЯ ВОДА – КЛЮЧ К ЗДОРОВЬЮ

Много чудесных легенд и сказаний донесли до нас свидетельства того, что водами целебных источников люди пользовались с незапамятных времён. Первые попытки объяснить действие минеральных вод были предприняты греческим врачом Архигенесом, жившим в I веке н.э. В предгорьях Эпидавра в Греции археологи обнаружили развалины древней водолечебницы, построенной не позднее IV века до н.э.

МИНЕРАЛЬНАЯ ВОДА –

ВОДА, ОБРАЗУЮЩАЯСЯ
В ГЛУБИНЕ ЗЕМНОЙ КОРЫ
И ЯВЛЯЮЩАЯСЯ
ПРОДУКТОМ
СЛОЖНЫХ ПРИРОДНЫХ
ГЕОХИМИЧЕСКИХ
ПРОЦЕССОВ

Природные минеральные воды содержат в повышенных концентрациях минеральные, органические вещества, газы, которые также могут обладать какими-либо специфическими свойствами (температура, реакция среды, радиоактивность), благодаря чему оказывают на организм лечебное действие.

Курсовое применение минеральных вод в условиях санатория повышает устойчивость организма к повреждающему (в том числе токсическому) воздействию. Оказывает противовоспалительное действие, нормализует моторную и секреторную функции желудка, желчевыводящих путей, кишечника. Влияет на все виды обмена веществ, способствуя восстановлению тканей повреждённых органов.



КОМПАНИЯ ООО «ТММ»
ПРЕДЛАГАЕТ
ВАШЕМУ ВНИМАНИЮ
УСТРОЙСТВО (БЮВЕТ)
«ТАЛИЦА»
ДОЗИРОВАННОГО ОТПУСКА
ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ,
В ТОМ ЧИСЛЕ
МИНЕРАЛЬНОЙ

ТАЛИЦА

УСТРОЙСТВО (БЮВЕТ)
ДОЗИРОВАННОГО ОТПУСКА
ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ,
В ТОМ ЧИСЛЕ МИНЕРАЛЬНОЙ

**ПОДАЧА ВОДЫ:**

- сеть водоснабжения;
- стандартная бутылка 19 л

**ЦИФРОВАЯ ИНДИКАЦИЯ
ТЕМПЕРАТУРЫ ВОДЫ****ВОДОНАГРЕВАТЕЛЬ
РАЗБОРНОГО ТИПА,
НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ****ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ
230 В****КОМПАКТНЫЕ
ГАБАРИТНЫЕ
РАЗМЕРЫ****ПРОСТОТА
ОБСЛУЖИВАНИЯ**

ВИДЫ БЮВЕТОВ



Талица Mono



Одна температура
нагрева воды



Талица Multi



Две температуры
нагрева воды

УСТРОЙСТВО (БЮВЕТ)
ДОЗИРОВАННОГО ОТПУСКА
ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ,
В ТОМ ЧИСЛЕ МИНЕРАЛЬНОЙ


СПОСОБ ПОДАЧИ ВОДЫ В БЮВЕТ




Центральная сеть
минерального
водоснабжения



Стандартная
бутыль 19 л

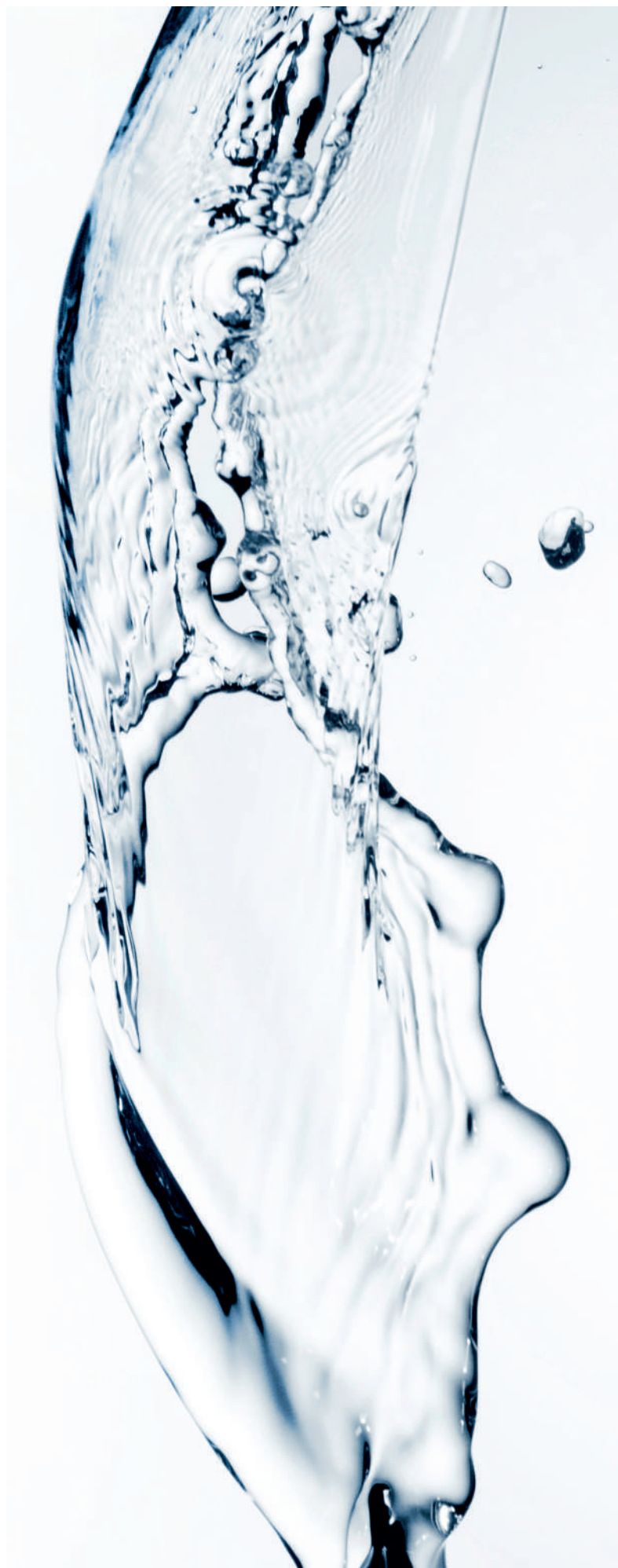


СПОСОБ ДОЗИРОВАНИЯ ВОДЫ

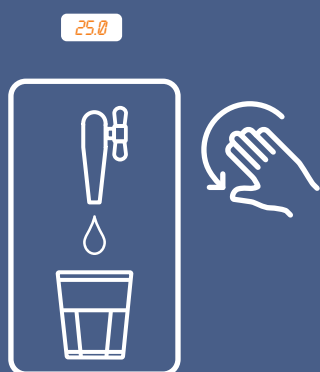

Ручное
дозирование



Автоматическое
дозирование

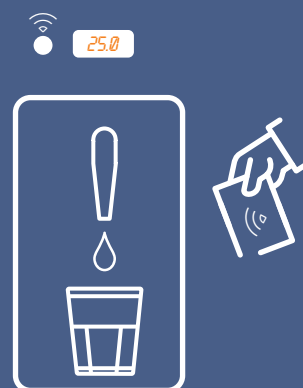


Автоматическое
дозирование
по электронной карте

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ*



Охлаждение
воды

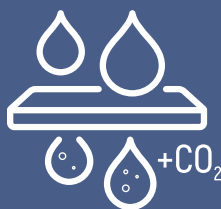

Насыщение воды
углекислым газом





Ультрафиолетовое
обеззараживание



* По индивидуальному заказу



КОНФИГУРАЦИИ БЮВЕТОВ

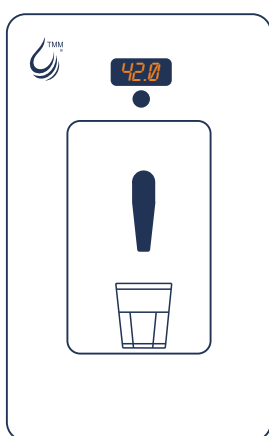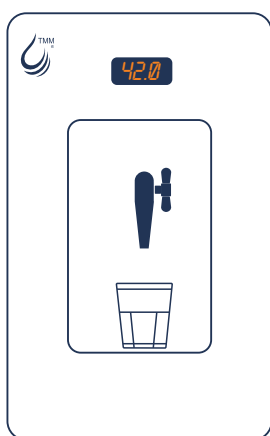

Талица Mono

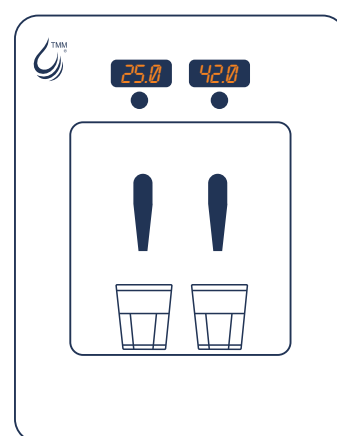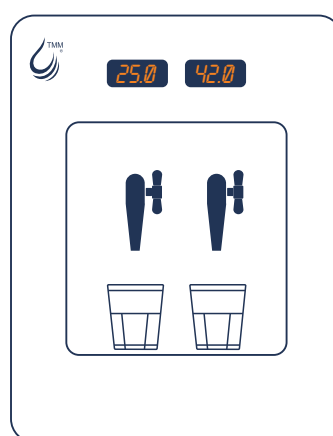

Талица Multi

Дозирование:

- Ручное
- Автоматическое

Одна температура

Подача воды из сети
минерального водоснабжения
или стандартной бутылки 19 л

Дозирование:

- Ручное
- Автоматическое


Две температуры

Подача воды из сети
минерального водоснабжения
или стандартной бутылки 19 л



Автоматическое дозирование
возможно по электронной карте

ПРИМЕРЫ БЮВЕТОВ

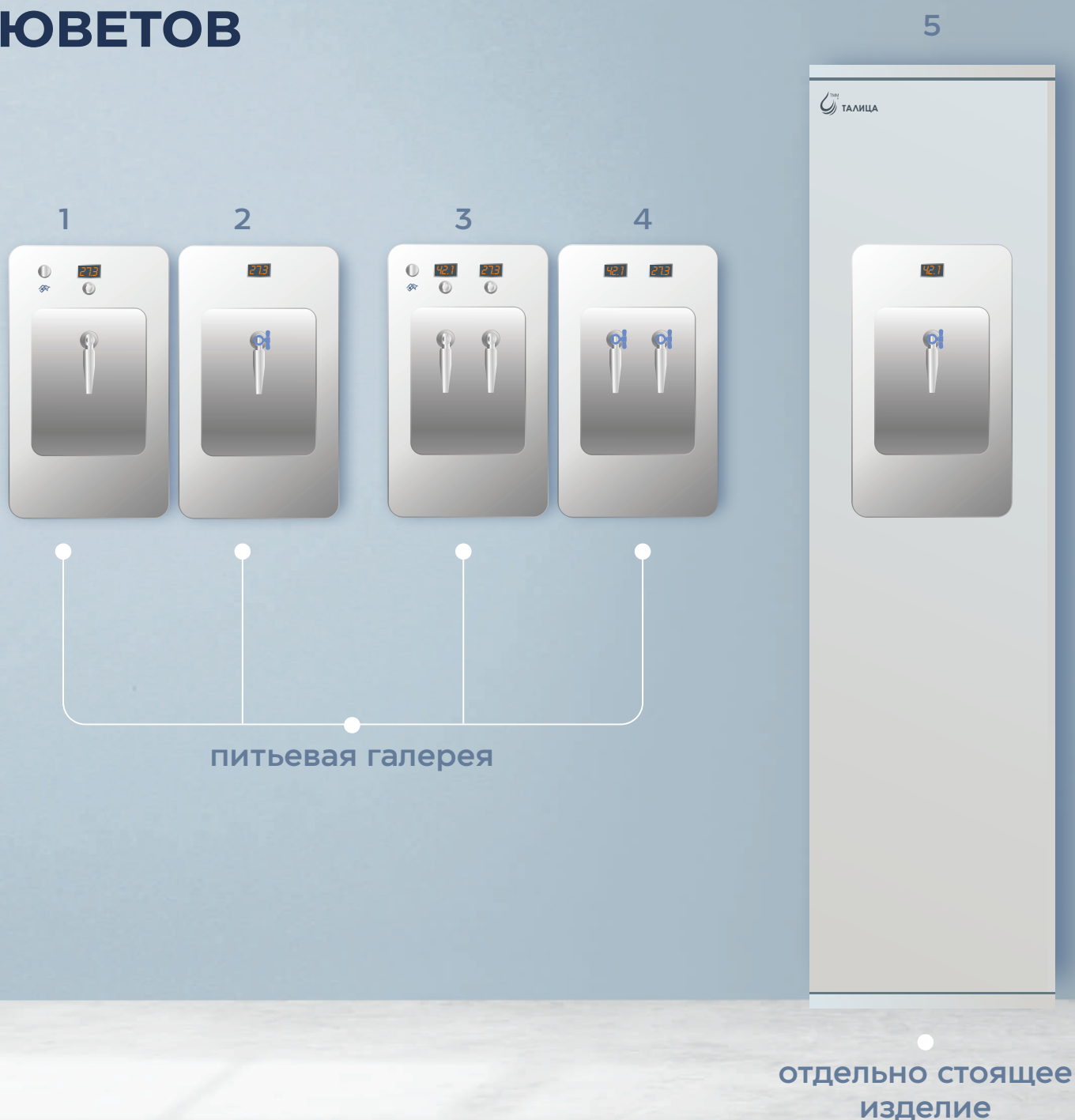

- | | | | | |
|--|--|--|--|--|
| <p>1</p> <p>ТАЛИЦА МОНО
Автоматическое
дозирование
Одна температура
Подача воды из сети
водоснабжения
или стандартной
бутыли 19 л</p> | <p>2</p> <p>ТАЛИЦА МОНО
Ручное
дозирование
Одна температура
Подача воды из сети
водоснабжения
или стандартной
бутыли 19 л</p> | <p>3</p> <p>ТАЛИЦА МУЛЬТИ
Автоматическое
дозирование
Один вид воды -
две температуры
Два вида воды -
одна/две температуры
Подача воды из сети
водоснабжения
или стандартной
бутыли 19 л</p> | <p>4</p> <p>ТАЛИЦА МУЛЬТИ
Ручное
дозирование
Один вид воды -
две температуры
Два вида воды -
одна/две температуры
Подача воды из сети
водоснабжения
или стандартной
бутыли 19 л</p> | <p>5</p> <p>ТАЛИЦА МОНО
Ручное
дозирование
Одна температура
Подача воды из сети
водоснабжения
или стандартной
бутыли 19 л</p> |
|--|--|--|--|--|

ВОЗМОЖНОСТИ ОБОРУДОВАНИЯ



НАГРЕВ ВОДЫ
ДО ЗАДАННОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ



ЦИФРОВАЯ ИНДИКАЦИЯ
ТЕМПЕРАТУРЫ ВОДЫ



ОТПУСК ДОЗЫ В РУЧНОМ
ИЛИ АВТОМАТИЧЕСКОМ РЕЖИМЕ




ПРОГРАММИРОВАНИЕ
ОБЪЁМА ДОЗЫ



ОТПУСК ДОЗЫ
ПО ЭЛЕКТРОННОЙ КАРТЕ



ОХЛАЖДЕНИЕ
ВОДЫ

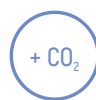


НАСЫЩЕНИЕ ВОДЫ
УГЛЕКИСЛЫМ ГАЗОМ



ОБЕЗЗАРАЖИВАНИЕ ВОДЫ
УЛЬТРАФИОЛЕТОВЫМ
ИЗЛУЧЕНИЕМ

СОСТАВ ОБОРУДОВАНИЯ

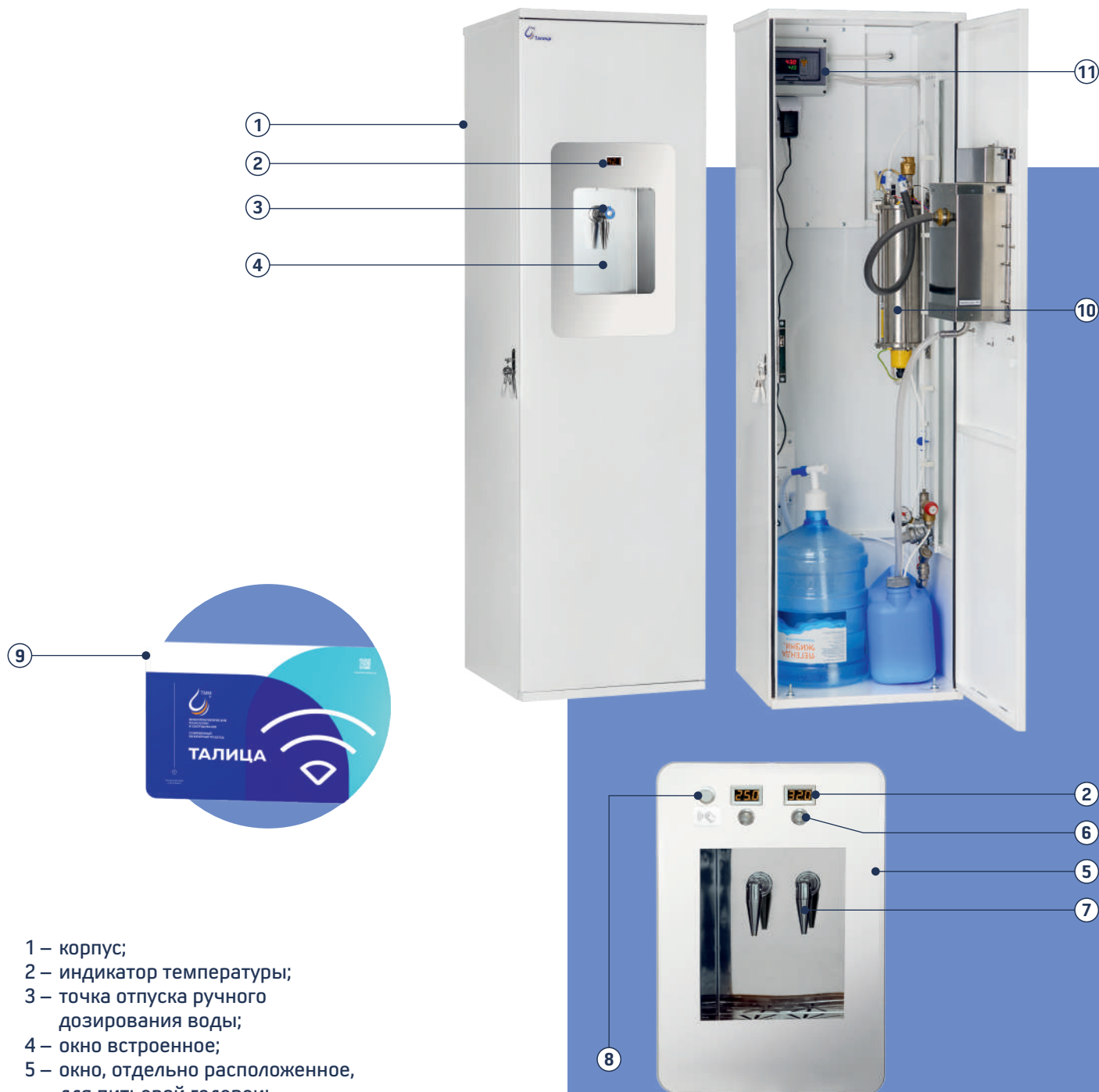

- 1 – корпус;
- 2 – индикатор температуры;
- 3 – точка отпуса ручного дозирования воды;
- 4 – окно встроенное;
- 5 – окно, отдельно расположенное, для питьевой галереи;
- 6 – кнопка налива дозы;
- 7 – точка отпуса автоматического дозирования воды;
- 8 – считыватель электронной карты;
- 9 – электронная карта;
- 10 – водонагреватель;
- 11 – панель управления.

ТАЛИЦА

УСТРОЙСТВО (БЮВЕТ)
ДОЗИРОВАННОГО ОТПУСКА
ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ,
В ТОМ ЧИСЛЕ МИНЕРАЛЬНОЙ

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ	ТАЛИЦА MONO	ТАЛИЦА MULTI
Электропитание	Однофазная сеть переменного тока	
Напряжение, В	230	
Потребляемая мощность, кВт, не более	1,2 ÷ 3,2	1,2 ÷ 6,2
Количество водонагревателей, шт.	1	1 ÷ 2
Номинальный объем водонагревателя, л	3,2	
Температура нагрева минеральной воды, °С	25 ÷ 42	
Производительность водонагревателя, л/мин.	1,2	
Производительность устройства проточного ультрафиолетового обеззараживания (УФО), л/мин.	3,0	
Способ подачи воды	Централизованная система водоснабжения	
	Стандартная бутыль 19 л	
Максимально допустимое давление воды при подключении к централизованной системе водоснабжения, МПа	0,6	
Способ дозирования	Ручной	
	Автоматический	
	Автоматический по электронной карте	
Диапазон автоматического дозирования, мл	(50 ÷ 250) ± 5	
Габаритные размеры корпуса, мм:		
- длина	500	
- ширина	500	
- высота	1740	
Масса, кг, не более	50	60



www.mir-tmm.ru

659322,
Алтайский край,
город Бийск,
ул. Социалистическая, 1

+7 (3854) 30-59-96
+7 963 507 50 26

mir_tmm@mail.ru

www.mir-tmm.ru

ООО «ТММ»

Российский разработчик
и производитель медицинского
оборудования для проведения
физиотерапевтических процедур
в санаториях, профилакториях,
центрах восстановительной
медицины и клиниках